

KLAXON®



ORTHOSTATICAL
Live with autonomy!



TWIST -Join the revolution!

Δώσε στην μέρα σου ένα Twist



Ασφαλές

Το Twist είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και πληροί τις απαιτήσεις καινοτομίας και τεχνολογίας. Είναι σχεδιασμένο να σας συνοδεύει κάθε στιγμή με απόλυτη ασφάλεια και αντοχή. Ενσωματωμένα φώτα LED για να κυκλοφορήσετε το βράδυ!



Κατάλληλο για όλους τους τύπους εδάφους

Το Twist ξεπερνά τα καθημερινά εμπόδια με ευκολία. Ανεβαίνει τις ανηφόρες χωρίς δυσκολία. Όταν τοποθετηθεί στο μπροστινό μέρος, ανυψώνει τους μπροστινούς τροχούς του αναπηρικού αμαξιδίου και με τον τρόπο αυτό επιτρέπει την κίνηση σε κάθε τύπο εδάφους.



Κομψό, τεχνολογικό και ασύρματο

Συνδέστε το σύστημα οδήγησης μέσω Bluetooth. Ελέγξτε και επιλέξτε τις προ-ρυθμίσεις απευθείας από την εφαρμογή Klaxon®. Τίποτα δεν στέκεται εμπόδιο ανάμεσα σε εσάς και την ελευθερία σας! Το Twist είναι κουλ και κομψό, ιδανικό για κίνηση με στυλ.

Ανακαλύψτε νέους τρόπους μετακίνησης



Γρήγορη και εύκολη σύνδεση

Το Twist μπορεί να συνδεθεί και να αποσυνδεθεί σε δευτερόλεπτα. Το καινοτόμο Σύστημα Σύνδεσης Klaxon® κάνει πολύ εύκολη την εγκατάσταση του Twist τόσο σε πτυσσόμενο (foldable) όσο και σε σταθερό (rigid) αναπηρικό αμαξίδιο.



Ελαφρύ και ευέλικτο

Το Twist είναι ελαφρύ. Περιστρέφεται 360° και είναι ιδανικό για στενούς χώρους. Η ώθηση του μοτέρ εξομαλύνει τους ελιγμούς σας. Φροντίζουμε για την κάθε λεπτομέρεια



Συμπαγές και μεταφερόμενο

Το Twist είναι μικρό σε όγκο και μπορεί να μεταφερθεί με αυτοκίνητο, τρένο ή αεροπλάνο. Χάρη στην ενσωματωμένη εργονομική λαβή του, μπορείτε να το σηκώσετε και να τα μεταφέρεται με ευκολία. Το ταξίδι γίνεται εύκολο!

Τεχνολογίες και εξαρτήματα



Χειρισμός

Ένα άγγιγμα του μοχλού είναι το μόνο που χρειάζεται για να επιταχύνει το Twist και να επιλέξει την προκαθορισμένη ταχύτητα. Για να σταματήσετε απλώς πατήστε το κουμπί.

Σύστημα Σύνδεσης Klaxon®

Χάρη σε αυτό το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα σύνδεσης Linking System Klaxon®, **το Twist μπορεί να εγκατασταθεί στο μπροστινό μέρος του αμαξιδίου** για εξωτερικές και εσωτερικές δραστηριότητες. **Η σύνδεση στο πίσω μέρος του αμαξιδίου είναι ιδανική για κίνηση σε εσωτερικούς χώρους.**

Ενσωματωμένα φώτα LED


Τα δύο φώτα led εξασφαλίζουν ορατότητα και ασφάλεια. Ζήσε τη βραδιά!

Εργονομικές λαβές

Η λαβή στο πίσω Σύστημα Σύνδεσης έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τη σύνδεση/αποσύνδεση. Η ενσωματωμένη λαβή διευκολύνει την μεταφορά.

Τσάντα ταξιδιού

Η τσάντα ταξιδιού σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε το Twist σας στο πορτ παγκάζ του αυτοκινήτου σας ή μέσα στη καμπίνα ενός αεροσκάφους.

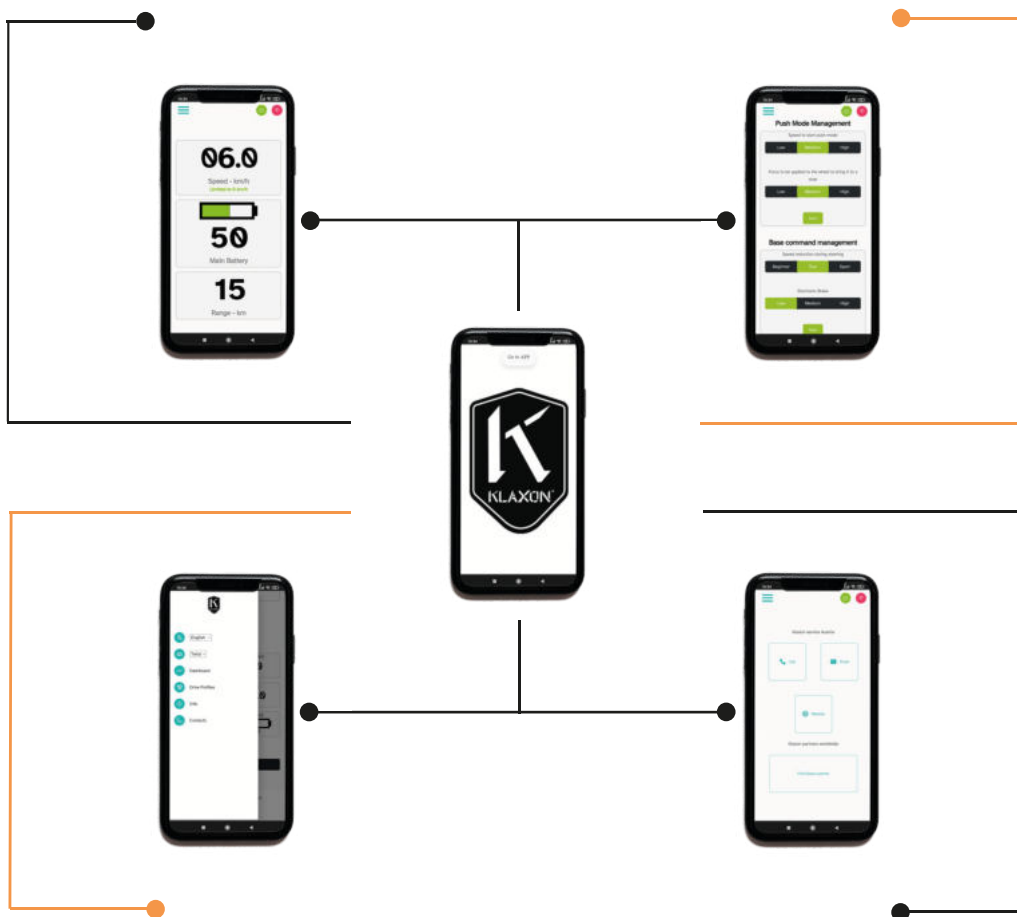

Klaxon® App

Επιλέξτε τις αγαπημένες σας προκαθορισμένες ρυθμίσεις οδήγησης μέσα smartphone σας. Μείνετε συνδεδεμένοι!

Τεχνικά Χαρακτηριστικά


Υλικό	Αλουμίνιο
Μοτέρ	36V x 750W brushless
Ρόδα	10" ελαστικό λείου πέλματος
Φρένα	με Χειριστήριο: Ηλεκτρονικό σύστημα Φρένων(EBS)
Ταχύτητα	με Χειριστήριο: έως 6 km/h
Μπαταρία	Λιθίου 36V x 4Ah (βάρος 1.5 kg) Χρόνος φόρτισης περίπου 2h
Αυτονομία	περίπου 20 km (σε μέτρια ταχύτητα, επίπεδο έδαφος και με βάρος χρήστη 70 kg)
Βάρος	7.4 kg (χωρίς μπαταρία)
Σύνδεση	Διαθέσιμες επιλογές: Κεντρικό Σύστημα Σύνδεσης Klaxon® Πλευρικό Σύστημα Σύνδεσης Klaxon® Πίσω Σύστημα Σύνδεσης Klaxon®
Διαστάσεις	Twist: Π 15 cm x Υ 34 cm x Δ 31 cm
Τεχνολογία	Έλεγχος Ταχύτητας Κατάβασης (σε λειτουργία χειριστηρίου), Έξυπνο Cruise Control (σε λειτουργία χειριστηρίου), Ηλεκτρονικό Σύστημα Φρένων (EBS)
Συμπεριλαμβ. Αξεσουάρ	Μπαταρία, Φορτιστής, Μπροστινό φως, Πίσω φως
Συμπεριλαμβ. Υπηρεσία	Klaxon® App
Προαιρετικά	Πρόσθετη μπαταρία

“Come on, let’s Twist again!”





Let's Twist Again - Chubby Checker

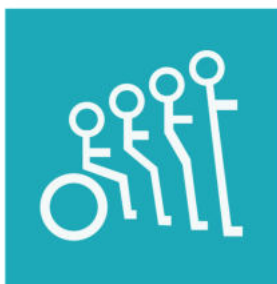

ORTHOSTATICAL
Live with autonomy!



KLAXON Mobility GmbH

ORTHOSTATICAL

Θεσσαλονίκη : Ανθέων 27, Συκιές
Τ. 2310 214127
Αθήνα: Φανερωμένης 50, Χολαργός
Τ. 210 8256748

info@orthostatical.gr



@orhtostatical



@orhtostatical



orthostatical