

Klaxon Mobility




η τέχνη της κίνησης



Klick Electric Standard



Μοντέλο	Klick Electric Standard
Υλικό	Αλουμίνιο
Μοτέρ	36V x 370W brushless
Ρόδα	14" ελαστικό λείο
Οθόνη	LCD Πολλαπλών επιλογών, 5 ρυθμίσεις ταχύτητας, ρυθμός βάρδης
Μπαταρία	Λιθίου 36V x 5.8 Ah (βάρος 1.3 kg)
Τιμόνι	Αλουμίνιο, ρυθμιζόμενο σε ύψος, βάθος και γωνία
Φρένα	Σύστημα διπλού φρένου 160 mm με Ηλεκτρονικό Σύστημα Πέδησης
Διάσταση	Π 50 cm x Υ 90 cm x Β 40 cm
Σύνδεση	Klick Σύστημα Σύνδεσης Klaxon® (παγκόσμια πατέντα)
Βάρος	8.0 kg (χωρίς μπαταρία)
Αυτονομία	Περίπου 25 km (ρύθμιση ταχύτητας 1, επίπεδο έδαφος)
Αξεσουάρ	Μπαταρία 5.8 Ah με φορτιστή, όπισθεν, οθόνη LCD, κόρνα, αναδιπλούμενο στήριγμα, προστατευτικό ρούχων

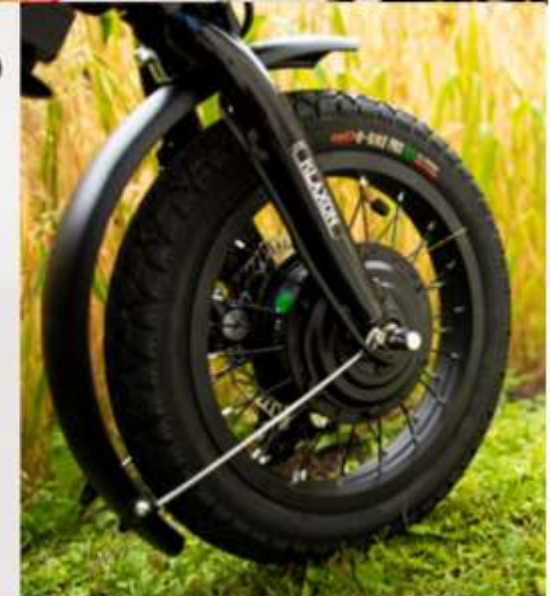

Linking System Klaxon® - Παγκόσμια Πατέντα

EBS – Ηλεκτρονικό Σύστημα φρένου

Ενα άγγιγμα της μανέτας του φρένου είναι το μόνο που χρειάζεται για να σταματήσετε το Klick χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε μηχανικό φρένο. Κατά την πέδηση EBS η παραγόμενη ενέργεια θα ανακτηθεί και χρησιμοποιείται για την επαναφόρτιση της μπαταρίας. Το μηχανικό φρένο μπορεί ακόμα να ενεργοποιηθεί ασκώντας μεγαλύτερη δύναμη στο μοχλό του φρένου, τα 2 συστήματα πέδησης θα συγχωνευτούν στην συνέχεια μαζί σε μια ενιαία δράση πέδησης

"Walking Pace" – Ρύθμιση ταχύτητας

Ιδανικό για τις ξεκούραστες βόλτες σας η λειτουργία "walking pace" θα κάνει το Klick σας να διατηρεί σταθερή ταχύτητα 4,5 km/h.





Klick Electric Tetra



Μοντέλο	Klick Electric Tetra
Υλικό	Αλουμίνιο
Μοτέρ	36V x 370W
Ρόδα	14" ελαστικό λείο
Οθόνη	LCD, Πολλαπλών επιλογών, 5 ρυθμίσεις ταχύτητας, ρυθμός βάρδισης
Μπαταρία	Λιθίου 36V x 5.8 Ah (βάρος 1.3 kg)
Τιμόνι	Αλουμίνιο, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, βάθος και γωνία, Άνετο Σύστημα Οδήγησης (γκάζι και φρένο ενεργοποιούνται μέσω της κίνησης έλξης και ώθησης)
Φρένο	Σύστημα διπλού φρένου 160 mm
Διάσταση	Π 50 cm x Υ 95 cm x Β 40 cm
Σύνδεση	Klick Σύστημα Σύνδεσης Klaxon® (παγκόσμια πατέντα)
Βάρος	8.6 kg (χωρίς μπαταρία)
Αυτονομία	Περίπου 25 km (ρύθμιση ταχύτητας 1, επίπεδο έδαφος)
Αξεσουάρ	Άνετο Σύστημα Οδήγησης, Μπαταρία 5.8 Ah με φορτιστή, όπισθεν, οθόνη LCD, κόρνα, αναδιπλούμενο στήριγμα, προστατευτικό ρούχων



Linking System Klaxon® - Παγκόσμια Πατέντα

"Walking Pace" – Ρύθμιση Ταχύτητας

Ιδανικό για τις ξεκούραστες βόλτες σας η λειτουργία "walking pace" θα κάνει το Klick σας να διατηρεί σταθερή ταχύτητα 4,5 km/h.





Klick Race Standard



Μοντέλο	Klick Race Standard
Υλικό	Αλουμίνιο
Μοτέρ	48V x 1000W χωρίς ψήκτρες, σε όλους τους τροχούς
Ρόδα	14" ελαστικό λείο
Οθόνη	LCD Πολλαπλών επιλογών, 5 ρυθμίσεις ταχύτητας, cruise control, ρυθμός βαδίσματος
Μπαταρία	Λιθίου 48V X 11 Ah (βάρος 3.0 kg)
Τιμόνι	Αλουμίνιο, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, βάθος και γωνία
Φρένα	Σύστημα Διπλού φρένου 160 mm με Ηλεκτρονικό Σύστημα φρένου
Διάσταση	Π 50 cm x Υ 90 cm x Β 40 cm
Σύνδεση	Klick Σύστημα Σύνδεσης Klaxon® (παγκόσμια πατέντα)
Βάρος	11.4 kg (χωρίς μπαταρία)
Αυτονομία	Περίπου 50 km (ρύθμιση ταχύτητας 1, επίπεδο έδαφος)
Αξεσουάρ	Μπαταρία 11 Ah με φορτιστή, όπισθεν, LCD οθόνη, κόρνα, αναδιπλούμενο στήριγμα, προστατευτικό ρούχων



Linking System Klaxon® - Worldwide Patent

EBS - Ηλεκτρονικό Σύστημα φρένου

Ένα άγγιγμα της μανέτας του φρένου είναι το μόνο που χρειάζεται για να σταματήσετε το Klick χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε μηχανικό φρένο. Κατά την πέδηση EBS η παραγόμενη ενέργεια θα ανακτηθεί και χρησιμοποιείται για την επαναφόρτιση της μπαταρίας. Το μηχανικό φρένο μπορεί ακόμα να ενεργοποιηθεί ασκώντας μεγαλύτερη δύναμη στο μοχλό του φρένου, τα 2 συστήματα πέδησης θα συγχωνευτούν στην συνέχεια μαζί σε μια ενιαία δράση πέδησης.

"Walking Pace" - Ρύθμιση Ταχύτητας

Ιδανικό για τις ξεκούραστες βόλτες σας η λειτουργία "walking pace" θα κάνει το Klick σας να διατηρεί σταθερή ταχύτητα 4,5 km/h.





Klick Race Tetra



Μοντέλο	Klick Race Tetra
Υλικό	Αλουμίνιο
Μοτέρ	48V x 1000W χωρίς ψήκτρες, σε όλους τους τροχούς
Ρόδα	14" ελαστικό λείο
Οθόνη	LCD Πολλαπλών επιλογών, 5 ρυθμίσεις ταχύτητας, ρυθμός βαδίσματος
Μπαταρία	Λιθίου 48V X 11 Ah (βάρος 3.0 kg)
Τιμόνι	Αλουμίνιο, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, βάθος και γωνία, Άνετο Σύστημα Οδήγησης (γκάζι και φρένο ενεργοποιούνται μέσω της κίνησης έλξης και ώθησης)
Φρένα	Σύστημα διπλού φρένου 160 mm
Διάσταση	Π 50 cm x Υ 95 cm x Β 40 cm
Σύνδεση	Klick Σύστημα Σύνδεσης Klaxon® (παγκόσμια πατέντα)
Βάρος	12.0 kg (χωρίς μπαταρία)
Αυτονομία	Περίπου 50 km (ρύθμιση ταχύτητας 1, επίπεδο έδαφος)
Αξεσουάρ	Άνετο Σύστημα Οδήγησης, μπαταρία 11 Ah με φορτιστή, όπισθεν, LCD οθόνη, κόρνα, αναδιπλούμενο στήριγμα, προστατευτικό ρούχων



Linking System Klaxon® - Παγκόσμια Πατέντα

"Walking Pace" - Ρύθμιση ταχύτητας

Ιδανικό για τις ξεκούραστες βόλτες σας η λειτουργία "walking pace" θα κάνει το Klick σας να διατηρεί σταθερή ταχύτητα 4,5 km/h.





Klick Mini Standard



Μοντέλο	Klick Mini Standard
Υλικό	Αλουμίνιο (με standard κάλυμμα carbon)
Μοτέρ	36V x 370W χωρίς ψήκτρες, σε όλους τους τροχούς
Ρόδα	8" ελαστικό λείο
Οθόνη	LCD Πολλαπλών επιλογών, 5 ρυθμίσεις ταχύτητας, ρυθμός βαδίσματος
Μπαταρία	Λιθίου 36V x 5.8 Ah (βάρος 1.3 kg)
Τιμόνι	Αναδιπλούμενο τιμόνι
Φρένα	Μονό φρένο 140 mm
Μέγιστη Διάσταση	(ανοιχτό) Π 45cm x Υ 90cm x Β 25cm
Μέγιστη Διάσταση	(κλειστό) Π 25cm x Υ 65cm x Β 25cm
Σύνδεση	Klick Σύστημα Σύνδεσης Klaxon® (παγκόσμια πατέντα)
Βάρος	7.7 kg (χωρίς μπαταρίες)
Αυτονομία	Περίπου 25 km (ρύθμιση ταχύτητας 1, επίπεδο έδαφος)
Αξεσουάρ	Μπαταρία 5.8 Ah με φορτιστή, LCD οθόνη, αναδιπλούμενο στήριγμα



Linking System Klaxon® - Παγκόσμια Πατέντα

"Walking Pace" - Ρύθμιση ταχύτητας

Ιδανικό για τις ξεκούραστες βόλτες σας η λειτουργία "walking pace" θα κάνει το Klick σας να διατηρεί σταθερή ταχύτητα 4,5 km/h.






Klick Carbon Standard

Μοντέλο	Klick Carbon Standard
Υλικό	Αλουμίνιο (με κάλυμμα Carbon , ενσωματωμένο φως Led)
Μοτέρ	36V x 370W χωρίς ψήκτρες, σε όλους τους τροχούς
Ρόδα	8" ελαστικό λείο
Οθόνη	LCD Πολλαπλών επιλογών, 5 ρυθμίσεις ταχύτητας, ρυθμός βαδίσματος
Μπαταρία	Λιθίου 36V x 5.8 Ah (βάρος 1.3 kg)
Τιμόνι	Αναδιπλούμενο τιμόνι
Brakes	Μονό φρένο 140 mm
Μέγιστη Διάσταση	(ανοιχτό) Π 45cm x Υ 90cm x Β 25cm
Μέγιστη Διάσταση	(κλειστό) Π 25cm x Υ 65cm x Β 25cm
Σύνδεση	Klick Σύστημα Σύνδεσης Klaxon® (παγκόσμια πατέντα)
Βάρος	7.9 kg (χωρίς μπαταρία)
Αυτονομία	Περίπου 25 km (ρύθμιση ταχύτητας 1, επίπεδο έδαφος)
Αξεσουάρ	Μπαταρία 5.8 Ah με φορτιστή, LCD οθόνη, ενσωματωμένο φως Led, αναδιπλούμενο στήριγμα

"Walking Pace" - Ρύθμιση ταχύτητας

Ιδανικό για τις ξεκούραστες βόλτες σας η λειτουργία "walking pace" θα κάνει το Klick σας να διατηρεί σταθερή ταχύτητα 4,5 km/h.

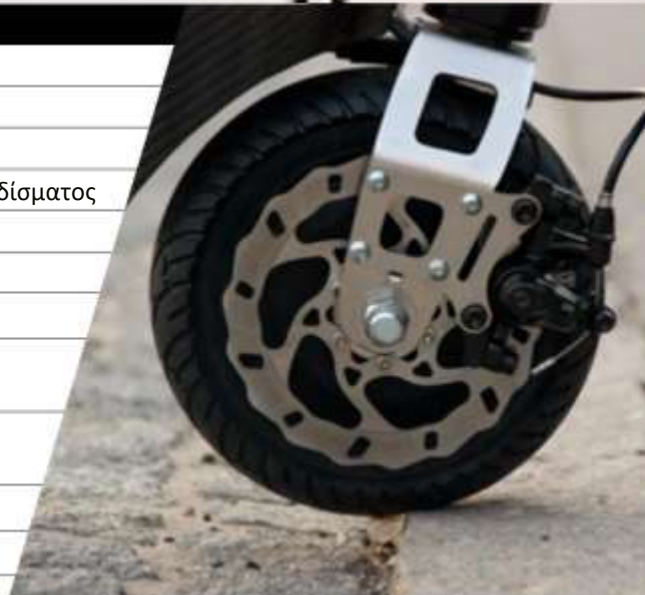

Linking System Klaxon® - Παγκόσμια Πατέντα





Klick Monster Standard



Μοντέλο	Klick Monster Standard
Υλικό	Αλουμίνιο
Μοτέρ	48V x 1000W χωρίς ψήκτρες
Ρόδα	20" ελαστικό XL
Οθόνη	LCD Πολλαπλών επιλογών, 5 ρυθμίσεις ταχύτητας, cruise control, ρυθμός βαδίσματος
Μπαταρία	Λιθίου 48V x 11 Ah (βάρος 3.0 kg)
Τιμόνι	Αλουμίνιο, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, βάθος και γωνία
Φρένα	Σύστημα Διπλού φρένου 160 mm με Ηλεκτρονικό Σύστημα φρένου
Διάσταση	Π 50 cm x Υ 90 cm x Β 50 cm
Σύνδεση	Klick Σύστημα Σύνδεσης Klaxon® (παγκόσμια πατέντα)
Βάρος	15.0 kg (χωρίς μπαταρία)
Αυτονομία	Περίπου 40 km (ρύθμιση ταχύτητας 1, επίπεδο έδαφος)
Αξεσουάρ	Μπαταρία 11 Ah με φορτιστή, όπισθεν, LCD οθόνη, κόρνα, αναδιπλούμενο στήριγμα, προστατευτικό ρούχων



Linking System Klaxon® - Παγκόσμια Πατέντα

EBS - Ηλεκτρονικό Σύστημα φρένου

Ένα άγγιγμα της μανέτας του φρένου είναι το μόνο που χρειάζεται για να σταματήσετε το Klick χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε μηχανικό φρένο. Κατά την πέδηση EBS η παραγόμενη ενέργεια θα ανακτηθεί και χρησιμοποιείται για την επαναφόρτιση της μπαταρίας. Το μηχανικό φρένο μπορεί ακόμα να ενεργοποιηθεί ασκώντας μεγαλύτερη δύναμη στο μοχλό του φρένου, τα 2 συστήματα πέδησης θα συγχωνευτούν στην συνέχεια μαζί σε μια ενιαία δράση πέδησης

"Walking Pace" – Ρύθμιση ταχύτητας

Ιδανικό για τις ξεκούραστες βόλτες σας η λειτουργία "walking pace" θα κάνει το Klick σας να διατηρεί σταθερή ταχύτητα 4,5 km/h.





Klick Hybrid Standard

Μοντέλο	Klick Hybrid Standard
Υλικό	Αλουμίνιο
Μοτέρ	48V x 500W χωρίς ψήκτρες
Ρόδα	20" ελαστικό λείο
Οθόνη	LCD Πολλαπλών επιλογών, 5 push-assistance επιλογή
Μπαταρία	Λιθίου 48V x 11 Ah (βάρος 3.0 kg)
Τιμόνι	Αλουμίνιο, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος
Φρένα	Διπλό Σύστημα φρένου 160 mm
Διάσταση	Π 60 cm x Υ 125 cm x Β 50 cm
Σύνδεση	Klick Σύστημα Σύνδεσης Klaxon® (παγκόσμια πατέντα)
Βάρος	18.0 kg (χωρίς μπαταρία)
Αυτονομία	Περίπου 50 km (σε ηλεκτρική λειτουργία, ρύθμιση ταχύτητας 1, επίπεδο έδαφος)
Ταχύτητα	9 x 1
Αξεσουάε	Μπαταρία 11 Ah με φορτιστή, LCD οθόνη, USB-port φορτιστής κινητού, αναδιπλούμενο στήριγμα, προστατευτικό ρούχων



Linking System Klaxon® - Παγκόσμια Πατέντα



Γρήγορη και εύκολη σύνδεση

Το καινοτόμο σύστημα σύνδεσης Klick επιτρέπει στο αγαπημένο σας KLiCK να συνδεθεί και να αποσυνδεθεί στο λεπτό χωρίς δύναμη έτσι ώστε εύκολα να εξερευνήσετε νέους ορίζοντες και να κινηθείτε ανεξάρτητα.

Παγκόσμιος άξονας σύνδεσης

Η σειρά Klick είναι κατάλληλη για όλα τα χειροκίνητα αναπηρικά αμαξίδια συμπεριλαμβανομένων και των πτυσσόμενων αμαξιδίων χάρη στο καινοτόμο άξονα σύνδεσης. Ζήστε ένα νέο επίπεδο ελευθερίας χωρίς να θέτετε σε κίνδυνο την ευελιξία και την άνεση του του αναπηρικού σας αμαξιδίου

Κατάλληλο για διαφορετικές τοποθεσίες

Το Klick σας μπορεί χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον παρέχοντάς σας μια εξαιρετική κάλυψη στο έδαφος είτε θέλετε να σκαρφαλώσετε σε απότομους δρόμους, να έχετε μια περιπέτεια εκτός δρόμου ή να κάνετε ελιγμούς εύκολα μέσα σε εμπορικούς πολυσύχναστους δρόμους ή μικρούς εσωτερικούς χώρους.

" Θέλω να αποκτήσω αναμνήσεις...
σε όλο τον κόσμο..."

Ακίνδυνο και Ασφαλές

Με το υψηλό επίπεδο ποιότητας και απόδοσης, θέλουμε να βεβαιώσουμε ότι το Klick σας πάει όπου θέλετε, έτσι μπορείτε να κινηθείτε ανεξάρτητα και να συμμετέχετε σε έναν πιο ενεργό τρόπο ζωής

Ελαφρύ και εύκολο στο χειρισμό

Αποκτήστε ένα νέο επίπεδο ελευθερίας αφού το Klick θα σας βοηθήσει να ξεπεράσετε καθημερινά εμπόδια να ανεβείτε απότομους δρόμους και να διαχειριστείτε δύσκολα εδάφη με ευκολία. Είναι ευέλικτο επιτρέποντάς σας να στρίβετε σε στενά μέρη.

Στιβαρό και κατάλληλο για ταξίδια

Εξερευνήστε νέους ορίζοντες, κάντε ένα περιπετειώδες ταξίδι ή απλώς οδηγείτε στους δρόμους και θα το απολαύσετε!



1



19



18



16



15



13



17



14



12

Βασικά Αξεσουάρ και Προαιρετικός εξοπλισμός



2

1 Mini Flybag - FLYBAG01

5 Power Battery (36V x 11Ah) - CC-1-11AH
Fly-Version (90 Wh) - CC-1-2,5AH PLUS

9 Klaxon Gloves - GLOVES

13 Front Light Monster/Race - CC-83-KIT

2 Standard Flybag - FLYBAG00

6 Mini Battery (36V x 5.8Ah) - MK-1-5AH
Fly-Version (90 Wh) - MK-1-2,5AH

10 Additional Traction Weight - CC-93-0000

14 Handlebar Extension Std - CC-25-0005
Handlebar Extension Tetra - CC-25-0004

3 Race Battery (48V x 11Ah) - CM-1-11AH
Fly-Version (280 Wh) - CM-1-5AH

7 Hybrid Battery (48V x 11Ah) - CH-1-11AH

11 Phone Holder - PHONE-HOLDER

15 Race Battery Charger - CC-88-0001

4 Slim Battery (36V x 5.8Ah) - CC-1-5AH
Fly-Version (90 Wh) - CC-1-2,5AH SLIM

8 Quick Release Adjustable Handlebar Stem
CC-23-22-24-0001

12 Standard Light - LED-WHITE-0000

16 Power Battery Charger - CC-88-0000
Hybrid Battery Charger - K500050

17 Slim Battery Charger - CC-89-0000
Mini Battery Charger - MK-88-0000

18 X-Large Wheels Set
FATWHEELS

19 14" Tyres - CC-3-1400



11



3



4



5



6



7



8



10



9

Klick Σύστημα Σύνδεσης Klaxon®

Παγκόσμια πατέντα



ORTHOSTATICAL
Live with autonomy!

www.Orthostatical.gr

info@orthostatical.gr



Το καινοτόμο Σύστημα Σύνδεσης Klick συνδέεται σε οποιοδήποτε χειροποδήλατο CLICK σε δευτερόλεπτα, επιτρέποντας να κάνετε εναλλαγή του αγαπημένου σας CLICK με ευκολία. Ο παγκόσμιος άξονας σύνδεσης προσαρμόζεται σε όλους τους τύπους χειροκίνητων αμαξιδίων συμπεριλαμβανομένων και των πτυσσόμενων. Ζήστε ένα νέο επίπεδο ελευθερίας χωρίς συμβιβασμούς, με ευελιξία και άνεση του αναπηρικού σας αμαξιδίου.

ΓΡΗΓΟΡΟ
και εύκολο να
τοποθετηθεί



ΣΥΝΔΕΣΗ
στο λεπτό



ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
άξονας σύνδεσης



Facebook:
[@Orthostatical](https://www.facebook.com/Orthostatical)

Instagram:
[@orthostatical](https://www.instagram.com/orthostatical)