

WHILL Europe B.V.



ORTHOSTATICAL

Θεσσαλονίκη : Ανθέων 27, Συκιές
Τ. 2310 214127
Αθήνα: Φανερωμένης 50, Χολαργός
Τ. 210 8256748

info@orthostatical.gr
www.orthostatical.gr

Vol 1.0

*Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει κινητικότητα σε άτομα που είναι εξοικειωμένα με τη χρήση ηλεκτρικού αναπηρικού αμαξιδίου.



Move More. Live More.

Βιώστε τον κόσμο με το WHILL και ζήστε τη ζωή χωρίς όρια.

Καινοτόμα προϊόντα κατασκευασμένα να αμφισβητούν την αντίληψη σχετικά με το τι μπορεί να είναι ένα όχημα προσωπικής μετακίνησης.

WHILL Model C2





Ευκολία

Το Model C2 είναι απλό στον χειρισμό και μπορεί να πραγματοποιεί κλειστές στροφές για να φτάσετε όπου θέλετε να πάτε.



Το καλάθι* βρίσκεται σε μια εύχρηστη θέση κάτω από το κάθισμα για να μπορείτε να βάζετε και να βγάζετε εύκολα τα πράγματά σας.

Διαστάσεις: 24 cm x 29 cm x 43 cm

*Προαιρετικό χαρακτηριστικό

Ακτίνα στρέψης

76cm




Περιπέτεια με το WHILL - το Model C2 μπορεί να πραγματοποιεί κλειστές στροφές, ώστε να μπορείτε να πάτε σε μέρη που ένα συνηθισμένο σκούτερ δεν μπορεί να σας πάει.



Ανασηκώστε τον βραχίονα για να καθίσετε εύκολα στην καρέκλα από το πλάι. Σταθείτε επάνω στο στήριγμα για τα πόδια για επιπλέον σταθερότητα.



Θέστε σε λειτουργία και προσαρμόστε την ταχύτητα με το ένα χέρι. Η συσκευή θα φρενάρει αυτόματα όταν απελευθερώσετε το χειριστήριο, ακόμα και σε κλίση.

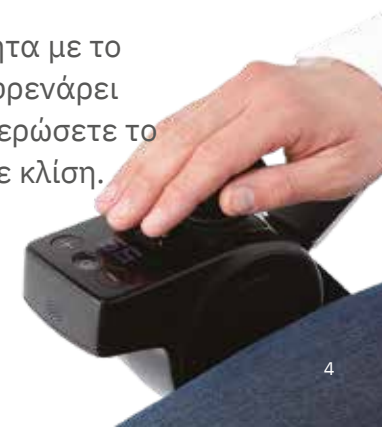



Ισχυρό


Εντυπωσιακή δύναμη που σας επιτρέπει να δείτε και να κάνετε περισσότερα. Ζήστε τη ζωή που φιλοδοξείτε με το WHILL Model C2. Βγείτε έξω και ζήστε την περιπέτεια!



Περάστε χωρίς κόπο πάνω από εμπόδια ύψους έως 5 cm με δύο ισχυρούς κινητήρες και μεγάλους μπροστινούς πολυκατευθυντικούς τροχούς.



Η ανάρτηση των πίσω τροχών απορροφά τους κραδασμούς όταν κινείστε πάνω σε ανώμαλο δρόμο ή εμπόδια.

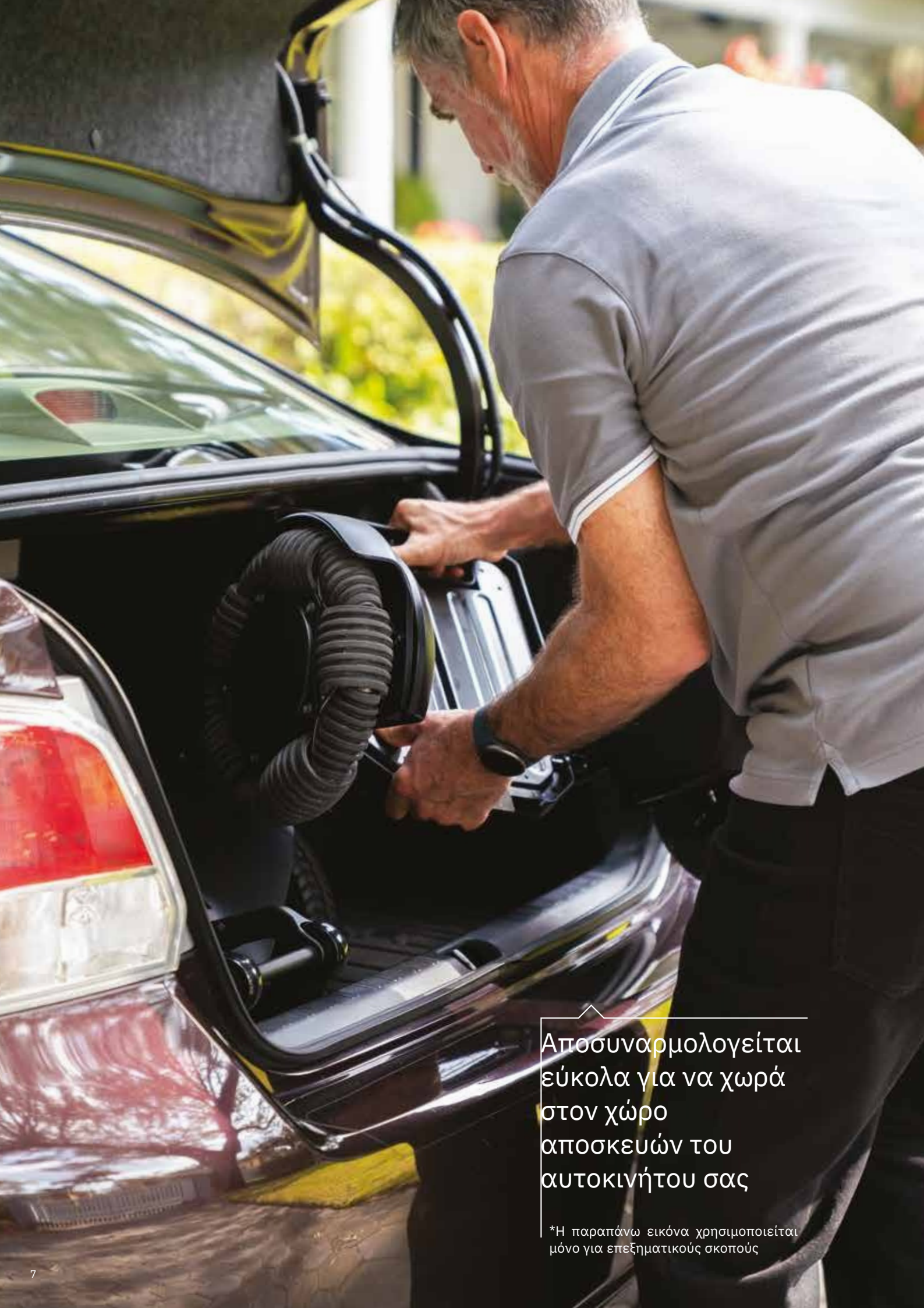

Αποσυναρμολογείται
εύκολα για να χωρά
στον χώρο
αποσκευών του
αυτοκινήτου σας

*Η παραπάνω εικόνα χρησιμοποιείται
μόνο για επεξηματικούς σκοπούς

Φορητό

Αποσυναρμολογείται σε τέσσερα εύκολα βήματα.

Το Model C2 μπορεί να αποσυναρμολογηθεί για εύκολη μεταφορά στον χώρο αποσκευών οποιουδήποτε αυτοκινήτου. Είτε κάνετε τα ψώνια σας το Σαββατοκύριακο είτε ταξιδεύετε με την οικογένειά σας, το Model C2 σας επιτρέπει να ζήσετε τη ζωή στο έπακρο.



1
Αφαιρέστε τη μπαταρία.



2
Ανυψώστε τον μοχλό κάτω από το κάθισμα.



3
Τραβήξτε το κάθισμα προς τα πάνω.



4
Τραβήξτε τον μοχλό στο πλάι της μπαταρίας προς το μέρος σας για να διαχωρίσετε τα μέρη.



Παραλλαγές χρώματος

Κινηθείτε με στυλ.

Επιλέξτε ανάμεσα σε 8 διαφορετικά χρώματα βραχίονα και προσαρμόστε το Model C2 για να ταιριάζει με το προσωπικό σας στυλ.



Μπλε



Λευκό



Γκρι*



Μαύρο



Κόκκινο



Πορ



Μοβ*



Χρυσό

*Χρώμα περιορισμένης έκδοσης

Τα έχουμε σκεφτεί όλα!

Οι παρατηρήσεις των πελατών μας, μας βοήθησαν να διαμορφώσουμε το Model C2. Συνδυάσαμε όλα τα χαρακτηριστικά που αναζητάτε, συμπεριλαμβανομένου κλειδώματος από απόσταση και της ικανότητας προσαρμογής της μέγιστης ταχύτητας για επιπλέον ασφάλεια.



Πίσω φως

Το πίσω φως είναι εμφανώς ορατό, ακόμα και αν κρέμεται κάποια τσάντα στο στήριγμα πλάτης, ώστε να είστε ασφαλείς στον δρόμο τη νύχτα.

Εμποδίζει την ολίσθηση



Κινηθείτε ευθεία σε διαδρομή με κλίση.

Το χειριστήριο μπορεί να τοποθετηθεί στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά.



Μπαταρία

Αποσπώμενη μπαταρία.

5

ώρες φόρτισης



Το Model C2 μπορεί να διανύει 18 χιλιόμετρα με φόρτιση 5 ωρών, ώστε να σας παρέχει άπλετη ισχύ για όλη την ημέρα σας.



2,7kg

Υπάρχει δυνατότητα αφαίρεσης της μπαταρίας και φόρτισής της σε μια συνηθισμένη οικιακή πρίζα.




Εφαρμογή



Ελέγξτε τη συνολική χιλιομετρική απόσταση, τη διανυθείσα απόσταση, το επίπεδο μπαταρίας, τους κύκλους πλήρους φόρτισης και κάντε πολλά περισσότερα με την εφαρμογή WHILL*. Μπορείτε επίσης να κλειδώνετε και να ξεκλειδώνετε τη μονάδα.

*Πρέπει να εγκαταστήσετε πρώτα την εφαρμογή.

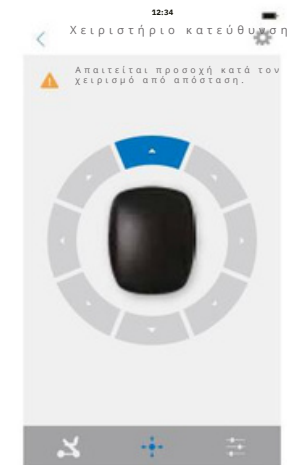


Η διαισθητική οθόνη του χειριστηρίου σας επιτρέπει να ελέγχετε τη μονάδα από απόσταση.



Ορίστε τη λειτουργία κίνησης σε «Οικολογική», «Κανονική» ή «Σπορ», ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Η σωστή εφαρμογή

Στο Model C2 μπορείτε να προσαρμόσετε εύκολα από το ύψος του καθίσματος και τη γωνία του στηρίγματος πλάτης έως τη θέση του χειριστηρίου (δεξιό ή αριστερό σύστημα κίνησης) για τη δημιουργία μιας άνετης εμπειρίας οδήγησης.

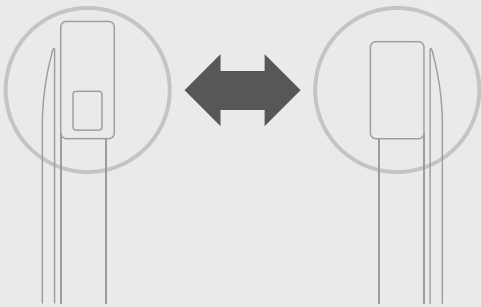

Το χειριστήριο μπορεί να τοποθετηθεί στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά.

- 1. Ύψος χειριστηρίου.....670, 690, 710, 730 mm
- 2. Γωνία στηρίγματος πλάτης.....90, 95, 100°
- 3. Ύψος στηρίγματος πλάτης.....340 - 460 mm
- 4. Ύψος καθίσματος.....405, 425, 445, 465, 485 mm
- 5. Γωνία καθίσματος.....5°
- 6. Βάθος καθίσματος.....400 mm
- 7. Πλάτος καθίσματος.....400 mm
- 8. Γωνία στηρίγματος ποδιών.....2°
- 9. Ύψος στηρίγματος ποδιών.....127 mm

Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε κάποιο δικό σας μαξιλάρι, για λόγους ασφάλειας, να επιλέγετε ένα μαξιλάρι που έχει επαρκείς φλογεπιβραδυντικές ιδιότητες.

Προδιαγραφές επιδόσεων

Εύρος οδήγησης	18 km	Κύκλοι φόρτισης μπαταρίας	~1.000
Μέγιστη ταχύτητα	6 km/h	Βαττώρες μπαταρίας	269 Wh
Σύστημα κίνησης	Δικινητήριο σύστημα κίνησης	Συνθήκες λειτουργίας	-15 - 40°C
Δυνατότητα κλίσης	10°	Μαξιλάρια καθίσματος	400 mm x 400 mm 450 mm x 450 mm
Ακτίνα στρέψης	760 mm	Πίσω λυχνίες	λυχνία LED (κόκκινη)
Ύψος αποφυγής εμποδίων	50 mm	Κόρνα	Ενσωματωμένη, στάθμη ήχου > 65dB
Απόσταση από το έδαφος	57 mm	Κατηγορία αναπηρικού αμαξιδίου	A
Σύστημα πέδησης	Ηλεκτρομαγνητικό		
Μέγιστη μεταφορική ικανότητα	136 kg		
Συνολικό μήκος (συμπεριλαμβάνεται το υποπόδιο):	985 mm		
Συνολικό πλάτος:	554 mm		
Συνολικό ύψος:	745 - 945 mm		
Διάταξη καθίσματος			
Μήκος:	570 mm		
Πλάτος:	550, 600, 650 mm		
Ύψος:	480 mm		
Πίσω βάση κίνησης			
Μήκος:	590 mm		
Πλάτος:	554 mm		
Ύψος:	300 mm		
Μπροστινή βάση κίνησης			
Μήκος:	720 mm		
Πλάτος:	554 mm		
Ύψος:	270 mm		
Τύπος μπροστινών τροχών:	Πολυκατευθυντικός τροχός		
Τύπος πίσω τροχών:	Βασικοί τροχοί: Λάστιχο χωρίς αέρα		
Άλλες προδιαγραφές			
Χρόνος φόρτισης Μπαταρία	5 ώρες Ιόντων λιθίου (25,3 V x 10,6 Ah)		



*Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως κάθισμα σε αυτοκίνητο ή κάποιο άλλο όχημα.

*Η κενή συσκευή μπορεί να μεταφέρεται με χερσαία και εναέρια μέσα μεταφοράς.

Αξεσουάρ

Αγοράστε αξεσουάρ για ακόμα μεγαλύτερη άνεση και εξατομίκευση



Καλύμματα βραχίονα

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα αγοράζοντας ένα επιπρόσθετο από τα οκτώ χρώματα.

Ζεύγος αριστερού και δεξιού βραχίονα.



Ζώνη ασφαλείας για τη μέση

Συγκρατεί σταθερά στη θέση καθίσματος ακόμα και σε έδαφος με κλίση.



Μπαταρία

Αυτή η ελαφριά μπαταρία βάρους 2,7 kg μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εφεδρική μπαταρία.



Φορτιστής μπαταρίας

Ένα εξαιρετικό συμπλήρωμα σε μια εφεδρική μπαταρία, σας επιτρέπει να περνάτε από τη μία πλήρως φορτισμένη μπαταρία στην επόμενη πλήρως φορτισμένη μπαταρία για να είστε συνεχώς σε κίνηση.



Κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη


Προστατεύει τη συσκευή από σκόνη και βρωμιά όταν αποθηκεύεται σε εξωτερικό χώρο*.

*Δεν είναι αδιάβροχη. Να μην χρησιμοποιείται για προστασία από τη βροχή.



Υποδοχή μπαστουνιού

Μπαστούνια σχήματος T, μπαστούνια με λαβή και πατερίτσες μπορούν να στερεωθούν στο κυρίως σώμα.

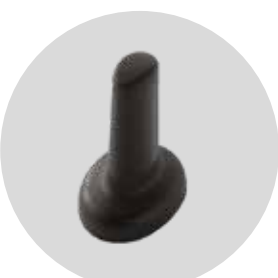

Joystick

Μπορείτε να το χειριστείτε πιάνοντάς το με το χέρι σας ή στερεώνοντάς το ανάμεσα στα δάχτυλά σας.



A woman with short grey hair is sitting on a motorized exercise bike in a park. She is wearing a grey long-sleeved shirt, a patterned scarf, and light-colored pants. The bike is black with pink accents on the seat and pedals. In the background, there is a large stone fountain with water spraying, green park benches, and trees. The scene is bright and sunny.

Move More.
Live More.